

2S<sup>®</sup>

Paramedical  
Equipment

Οδηγίες Χρήσης για  
**ΝΑΡΘΗΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΕΣΩ  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΝΑΡΘΗΚΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ  
ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΙ: 10.05.006& 10.05.007

**GR**



## Οδηγίες Χρήσης

# ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η χρήση των νάρθηκων ανάρτησης ή ανάπαυσης άκρου ποδός συνιστάται για τις περιπτώσεις ελέγχου της σωστής ευθυγράμμισης και τοποθέτησης του αστραγάλου. Οι νάρθηκας άκρου ποδός είναι σχεδιασμένοι για να βοηθούν τους ασθενείς που πάσχουν από μυϊκή αδυναμία (πτώση πτέρνας) που έχει προκληθεί από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, κάκωση νωτιαίου μυελού, μυϊκή δυστροφία, σκλήρυνση κατά πλάκας και περιφερική νευροπάθεια. Οι νάρθηκας άκρου ποδός μπορούν να ακινητοποιήσουν τον αστράγαλο και την κνήμη σε περιπτώσεις αρθρίτιδας ή κατάγματος ενώ παράλληλα ενισχύουν την φυσιολογική κίνηση του αστραγάλου και την λειτουργική κινητοποίηση των ποδιών. Οι συγκεκριμένοι νάρθηκας (AFOs) έχουν χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες για την θεραπεία προβλημάτων του χαμηλότερου σκέλους των κάτω άκρων. Οι νάρθηκας AFO μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της θέσης ασθενών με εγκεφαλική παράλυση ή εκ γενετής παραμόρφωση, ακινητοποιώντας κνήμη / αστράγαλο σε περιπτώσεις Charcot, Κατάγματος, Αρθρίτιδας ή απλή για διαχείριση τραύματος.


Διατίθενται σε 2 τύπους: στον νάρθηκα ανάρτησης έως υποδήματος, ο οποίος ενδείκνυται για καθημερινή χρήση κατά την επίτευξη των καθημερινών σας δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι προσαρμόζεται και μέσα από υποδήματα και στον νυκτός ή ανάπαυσης, ο οποίος είναι πιο ενισχυμένος και του οποίου η χρήση ενδείκνυται κατά τις μετακινήσεις σας μέσα στο σπίτι, όπου καλείστε να ξεκουράζετε το πάσχον πόδι, ακινητοποιώντας το σε μια οριζόντια στάση. Ο νάρθηκας ξεκούρασης διαθέτει πρόσθετο αξεσουάρ, ένα πλαστικό T (ταφ) ακινητοποίησης για αποτελεσματικότερη αποθεραπεία.

### ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.05.006



Ο νάρθηκας ανάρτησης άκρου ποδός έως υποδήματος είναι ένας νάρθηκας που αγκαλιάζει τον αστράγαλο και το κάτω μέρος της πτέρνας του ποδιού, ενώ παράλληλα κρατά τον αστράγαλο και την κνήμη σε όρθια, κάθετη θέση. Είναι ένας στατικός, εύκαμπτος νάρθηκας που παρέχει βοήθεια σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται αδυναμία των μυών της κνήμης και προς τον αστράγαλο ενώ ταυτόχρονα παρέχει σχετική σταθερότητα στο πέλμα. Ο νάρθηκας AFO μπορεί να περιορίσει τις κινήσεις του νοσημένου αστραγάλου και να σταθεροποιήσει την υποστραγαλική άρθρωση, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της προσαγωγής και απαγωγής. Ενδείκνυται για εφαρμογή που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της βάδισης σε διάφορες μετεγχειρητικές καταστάσεις, σε περιπτώσεις πάρεσης του περονιαίου νεύρου ή παράλυσης άκρου ποδός ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει σημαντικά την ιπποποειδή βάδιση.

### ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.05.007

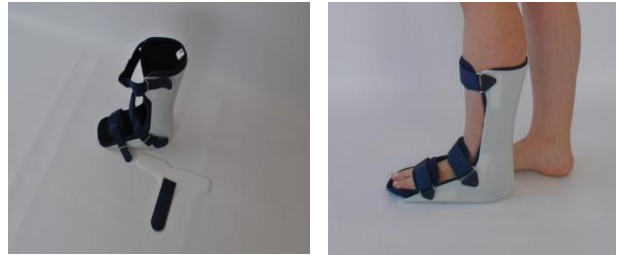

Ο νάρθηκας ανάπαυσης και νυκτός της 2S αποτελείται από ένα θερμοπλαστικό κέλυφος το οποίο αγκαλιάζει το οπίσθιο μέρος της κνήμης του ποδιού και εκτείνεται από την κορυφή της γάμπας έως το τέλος της. Ο νάρθηκας, στο εσωτερικό του έχει μια μαλακή αφαιρούμενη επένδυση και ασφαλίζει στο πόδι με ταινίες velcro. Το κέλυφος είναι σχεδιασμένο ώστε να εφάπτεται απόλυτα στον αστράγαλο για να επιτρέψει την ακινητοποίηση και την σωστή τοποθέτηση του ποδιού. Η γωνία μεταξύ της κνήμης και της πατούσας μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τρεις ιμάντες σταθεροποίησης που βρίσκονται σε 3 διαφορετικά σημεία σταθεροποίησης ποδιού. Στο πάνω μέρος της κνήμης, στο κουτεπιέ και στα ποδοδάχτυλα. Χάρη στους ρυθμιζόμενους ιμάντες, το πόδι μπορεί να ευθυγραμμίζεται και να συγκρατείται σε όρθια θέση για να παρέχει ένα τέντωμα στον ποδοκνημικό μυ για τη μείωση ή την πρόληψη συσπάσεων και σφιζιματος στην γάμπα. Αυτό το είδος νάρθηκα έχει σχεδιαστεί για να τεντώνει την πελματιαία περιτονία και τον αχίλλειο τένοντα, προκειμένου να βοηθή στην ανακούφιση του πόνου και στην ταχύτερη απούληση του πελματιαίου άλγους και της αχίλλειου τενοντίτιδας. Χάρη στο πρόσθετο αξεσουάρ (πλαστικό T (ταφ) ακινητοποίησης) καθίσταται πιο εύκολη η ενεργοποίηση ανάπαυσης του ποδιού και του αστραγάλου σε πολλαπλές θέσεις. Συνιστάται η χρήση του κατά τη νύχτα, για ηρεμία και χαλάρωση των μυών, καθώς η έκταση που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του νάρθηκα συμβάλλει στην ενίσχυση των μυών του γαστροκνημιαίου.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

#### ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ

Ο καθορισμός του μεγέθους είναι ανάλογος του νούμερου του παπουτσιού σας.

S	M	L
35-38cm	38-41cm	41-45cm

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ (και για τους δυο νάρθηκας)

1. Ανοίξτε όλους τους ιμάντες βέλκρο



2. Γλιστρήστε απαλά το πόδι σας μέσα στον νάρθηκα, τοποθετώντας προσεκτικά το πόδι σας μέσα σε αυτόν, προσέχοντας τα σημεία επαφής. Η πτέρνα σας πρέπει να βρísκει το πίσω μέρος του νάρθηκα και να εφάπτεται, δίνοντάς σας την αίσθηση ότι ο νάρθηκας αγκαλιάζει την πτέρνα σας.

3. Δέστε καλά όλους τους ιμάντες στο κέλυφος του νάρθηκα, ώστε να σταθεροποιήσετε το πόδι σας.



4. Σε περίπτωση που ο γιατρός σας σας έχει συστήσει να φοράτε τον νάρθηκα με παπούτσι (περίπτωση έσω υποδήματος νάρθηκα), ανοίξτε το παπούτσι πλευρικά ώστε να είναι όσο πιο ανοιχτό και χαλαρό δύναται. Έπειτα, τοποθετήστε το πόδι σας με τον νάρθηκα μέσα στο παπούτσι. Και δέστε τα κορδόνια.

5. Για να βγάψετε τον νάρθηκα από το παπούτσι, φροντίστε να ξαναχαλαρώσετε το δέσιμο του παπουτσιού.

6. Για τον νάρθηκα ανάπαυσης ακολουθείτε την ίδια διαδικασία, τοποθετώντας το πόδι σας σε οριζόντια θέση ξεκούρασης, μετά την εφαρμογή και τη σταθεροποίησή του.

7. Προσαρμόστε την προέκταση T για καλύτερη σταθεροποίηση/ακινητοποίηση.



8. Σε περίπτωση που θέλετε να αφαιρέσετε τον νάρθηκα, απασφαλίστε τους ιμάντες και αφαιρέστε τον νάρθηκα.

### **ΣΥΝΘΕΣΗ**

Θερμοπλαστικό υλικό

Εσωτερική αφαιρούμενη επένδυση: Αφρώδες υλικό 60%, Πολυεστέρας 15%, Βαμβάκι 15%, Ελαστάνη 10%

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

Το συγκεκριμένο ορθοπεδικό βοήθημα, σε καμία περίπτωση δεν θα αποτρέψει ή μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού σας. Μην δένετε πολύ σφιχτά τους ιμάντες. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κοκκινίλες ή πρηξίματα, ή πόνο σταματήστε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που συνιστάται από τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για τη μη ορθή χρήση του προϊόντος.

- Δεν ενδείκνυται η κοινή χρήση του νάρθηκα με άλλους πάσχοντες.
- Κρατείστε τον νάρθηκα μακριά από τα παιδιά.
- Σε περίπτωση που παρατηρήσετε περιέργες αλλαγές στο σώμα σας, αύξηση πόνου, ενόχληση, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας.
- Φροντίστε να φοράτε πάντοτε μια βαμβακερή κάλτσα κάτω από τον νάρθηκα. Η κάλτσα θα μειώσει την τριβή και την εφίδρωση καθώς και πιθανούς ερεθισμούς. Καλό είναι η κάλτσα σας να είναι απαλή, από 100% βαμβάκι χωρίς να δημιουργεί ζάρες. Αν πρέπει να εφαρμόζετε τον νάρθηκα σε 24ωρη βάση, φροντίστε να αλλάζετε κάλτσα.
- Ο νάρθηκας συνιστάται να φοριέται με παπούτσι όταν περπατάτε ή στέκεστε σε όρθια θέση, εκτός να ο γιατρός σας σας έχει συμβουλέψει διαφορετικά. Ένα χαμηλό αθλητικό παπούτσι με αθλητική σόλα αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή.
- Σιγουρευτείτε ότι έχετε εφαρμόσει τον νάρθηκα κατά τρόπο άνετο και αποτελεσματικό
- Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα υλικά του.
- Σε περίπτωση που έχετε ευαισθησία ή αλλεργία στο βέλκρο ή σε κάποιο από τα υλικά της σύνθεσης του νάρθηκα μην τον εφαρμόζετε κατάσαρκα, για να αποφεύγονται ερεθισμοί από ανεπιθύμητη ή εκτεταμένη εφίδρωση.

### **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Το συγκεκριμένο προϊόν που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ειδική υποστηρικτική βοήθεια και άνεση.

Ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας θα σας συμβουλέψουν για τις ενδεικνυόμενες χρήσεις του ορθοπεδικού βοηθήματος που προμηθευτήκατε.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ**

Κλείστε καλά τις επιφάνειες που είναι καλυμμένες με βέλκρο.

Προκειμένου να καθαρίσετε το νάρθηκά σας, χρησιμοποιήστε ένα υδρόφιλο πανί τύπου (wettex) ή τρίψτε με μια πετσέτα εμποτισμένη με οινόπνευμα.

*Για την εσωτερική υφασμάτινη αποσπώμενη επένδυση του νάρθηκα ανάπαυσης και νυκτός ακολουθείτε τις ακόλουθες οδηγίες πλύσιματος:*

Μην πλένετε ποτέ σε πλυντήριο.

Ενδείκνυται μόνο πλύσιμο στο χέρι, στους 30°C.

Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο.

Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή απορρυπαντικό με ενσωματωμένο μαλακτικό.

Απλώστε κατά μήκος σε μια επιφάνεια μέχρι το προϊόν να στεγνώσει.

Το προϊόν δεν σιδερώνεται.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι 100% στεγνό πριν την εφαρμογή.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ !**

ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ/ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.

**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2S ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.**

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.**

Instructions for use  
ANKLE FOOT ORTHOSIS (A.F.O.) – NIGHT RESTING  
A.F.O.

CODES: 10.05.006 & 10.05.007

EN



## Instructions for use

### ANKLE FOOT ORTHOSIS

#### SPECIFICATIONS / INTENDED USE

The AFO use is recommended for the control of the ankle position. AFOS' are designed to help patients who suffer from muscle weakness(drop foot) caused by a stroke, spinal cord injury, muscular dystrophy, multiple sclerosis and peripheral neuropathy. They also immobilize the ankle and lower leg in the presence of arthritis or fracture and enhances normal movement of the ankle, while increasing the efficiency of walking.. AFOs' (Ankle Foot Orthosis) have been used for decades to treat physical problems with the lower limb. AFO's are commonly used to treat foot drop due to Stroke, MS (Multiple Sclerosis), CP (Cerebral Palsy), Nerve Damage, Spinal Cord Injuries, Traumatic Brain Injuries, and General Weakness. The AFO can also be used for positional support for patients with Excessive Muscle Tone, Paralysis, or Congenital Deformity, and to immobilize the foot/ankle in cases of Charcot Feet, Fracture, Arthritis, or Wound Management.

**CODE: 10.05.006**



The ankle foot orthosis (AFO) is an orthosis or brace that surrounds the ankle and the lower part of the foot. AFO'S are L shaped and are externally applied to the leg and foot. The 2S AFOorthosis is a flexible L shaped AFO with the upright portion behind the calf and the lower portion running under the foot. The flexible AFO provides some dorsiflexion assistance ( e.g. weak shin muscles) to the ankle joint and it also provides relative stability to the subtalar joint. that can block or limit ankle movements and stabilize the subtalar joint, while at the same time can help in the control of the adduction and abduction of the forefoot. Is made of thermoplastic material, is extremely thin and can be worn under your shoe.

**CODE: 10.05.007**



The 2S night resting AFO boot is a thermoplastic shell which encompasses the posterior (back) third of the leg and extends from the top of the calf to the end of the foot. The AFO has a soft lining and is secured with Velcro strapping. The shell is trimmed back at the ankle to allow the foot section to move upwards. The angle between the foot and leg can be adjusted using three straps which attach to the end of the foot section, to the instep and the top of the calf section . By virtue of the adjustable straps, the foot can be aligned and held in an upward position to provide a stretch to the calf muscle to reduce or prevent contracture (tightness) in the calf. This type of brace is designed to Stretch the plantar fascia and Achilles tendon in order to help pain relief and speed healing of plantar fasciitis or Achilles tendonitis. Removable multi - position AFO. Super absorbing removable/washable liner. Enabling resting of the foot and ankle in multi-positions.

Prevents ankle plantar flexion contractures. Night Resting AFO's for stretching the calf muscles aid in the management of heel pain (plantar fasciitis) and Achilles tendonitis.

#### APPLICATION INSTRUCTIONS

##### MEASUREMENT & SIZING

Sizing according to your shoe size.

S	M	L
35-38cm	38-41cm	41-45cm

##### APPLICATION

1. Open all straps to maximum end point.



2. Slide foot in proper AFO, placing heel firmly down and back into the heel cup, in a way that it embraces your heel.

3. Fasten all straps into shell in order to provide a firm but comfortable hold of the ankle.



4. In case you are allowed by your doctor to wear it with shoe, open shoe with a shoe to maximum slackness and slide foot with AFO into shoe (shoe horns may be used).

5. Secure shoe.

6. For the night/resting AFO you follow exactly the same instructions for its application.

7. Make sure that you keep your foot aligned in an horizontal position. It is recommended that you attach the T- extension/support in order to achieve better stability and full immobilization.



8. In order to take off the supports, loosen shoe and remove from foot.
9. Loosen all straps on the orthosis and remove from foot.

### **COMPOSITION**

Thermoplastic material

Inner night AFO's removable lining : Sponge 60%, Polyester 15%, Cotton 15%, Elastane 10%

### **GENERAL WARNINGS**

- These devices will not prevent or eliminate any risk of injury. Do not over-tighten the straps. If there are any signs of swelling, pain or skin irritation, discontinue immediately and consult a medical professional.
- These supports should only be used for the intended purpose in the manner described in this manual. No liability is accepted for improper use of the product.
- Sharing of the support is not recommended.
- Please keep the products out of the reach of children.
- A clean sock must be worn under your orthosis. The sock will reduce friction, making application of the orthosis easier. It will also assist in reducing the effects of perspiration. The sock should be wrinkle free and higher than the top of the orthosis. Cotton socks are recommended. If perspiration is heavy, or the AFO is intended for 24 hour wear, then change socks during the day. Your orthosis must always be worn with a shoe or sneaker when standing or walking, unless otherwise instructed. Low top, lace-up athletic style shoes with a flat bottom work best.
- Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms), please contact your healthcare specialist without delay.
- Ensure the supports are fastened comfortably.
- Check the products' composition for possible sensitivity/allergic reaction to any of the products' materials.
- Do not apply the products directly to your skin in order to avoid rashes from unwanted or excessive sweating.
- Carefully check the foot and leg for pressure areas after each wear period. Remove the orthosis and sock. Note any redness or irritation, particularly over bony prominences. The redness should disappear with 30-40 minutes. If the redness persists, or is accompanied by skin breakdown, fluid discharge or swelling, call your doctor.

### **Daily Activities**

The garment is designed to provide comfortable support for general use.

Consult your physician regarding daily activities that you are allowed to practice, depending on your condition.

### **WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS**

#### **For the daily use AFO:**

Close the Velcro bands and wash the product with the Velcro straps hermetically shut.

To clean the inside of your orthosis, use a wet washcloth and dry thoroughly with a towel. Rubbing alcohol has proven to work best.

#### **For the night AFO :**

#### **Follow exactly the same cleaning instructions for the plastic parts**

#### **For the inner removable lining do as follows:**

- Hand wash in water at 30°C.
- Do not wring the belt to remove water.
- This is to protect the internal components from damage.
- Do not dry clean.
- Do not use bleach.
- Do not tumble-dry
- Always dry lying flat.
- Do not dry with heat. (E.g. over a radiator). Do not iron
- Make sure that the product is 100% dried before use.

### **IMPORTANT NOTICE!**

WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO OBTAIN MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL PROFESSIONAL.

2S DISCLAIMS ANY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED THAT THESE PRODUCTS PREVENT INJURIES.

IN CASE THE PRODUCT HAS A DEFECT PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER, STORE OR PHARMACY. IN CASE OF A MANUFACTURING MALLFUNCTION YOU MAY RETURN THE PRODUCT WITH YOUR PURCHASE DOCUMENT WITHIN 15 DAYS FROM THE DAY OF THE PURCHASE.

