

2S[®]

Paramedical
Equipment

Οδηγίες Χρήσης για
2S ΙΜΑΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ –
ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ONE SIZE

ΚΩΔΙΚΟΙ: 10.06.031

GR



Οδηγίες Χρήσης

2S ΙΜΑΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ONE SIZE

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Ο ακινητοποιητής ώμου-βραχίονα είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ακινητοποιεί και να τοποθετεί το χέρι σε σταθερές θέσεις κοντά στον κορμό που βοηθούν στην αποθεραπεία του ώμου. Ο γιατρός σας σας έχει συστήσει έναν ακινητοποιητή για να υποστηρίξετε το χέρι σας αλλιώς ωστόσο και για να προστατευτείτε από αντανακλαστικές κινήσεις, οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται κατά την περίοδο της θεραπείας σας. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος ακινητοποιητής σας προστατεύει από πιθανές συγκρούσεις ή πίεση που μπορεί να ασκηθεί από τρίτους επάνω στα πάσχοντα σημεία επαφής, καθώς και από κακή στάση ή πίεση που μπορεί να ασκηθεί ακούσια κατά τη διάρκεια του ύπνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι ONE SIZE, επομένως προσαρμόζεται στις ανάγκες όλων των χρηστών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Προτού εφαρμόσετε τον ακινητοποιητή, διαχωρίστε τα μέρη από τα οποία αποτελείται για πιο εύκολη συναρμολόγηση.



1. Τοποθετείστε το φαρδύτερο μέρος (ζώνη) κάτω από τη γραμμή του στήθους σας. Είναι συνήθως πιο εύκολο να τοποθετήσετε τη ζώνη στην καθιστή θέση, με τον αγκώνα σας υποστηριζόμενο. Αρχικά, ασφαλίστε τη ζώνη με το βέλικρο σε μια άνετη θέση. Φέρτε τον προσαρτημένο στο πίσω μέρος της ζώνης ιμάντα προς τα εμπρός, περνώντας τον πάνω από τον υγιή ώμο σας.



2. Τυλίξτε την μανσέτα (βραχιόλι) στο πάνω μέρος του χεριού και συγκεκριμένα στο ύψος του δικέφαλου και ασφαλίστε με το βέλικρο που βρίσκεται πλευρικά της μανσέτας (βραχιόλι δικέφαλου) κολλώντας πάνω στο πλευρικό μέρος της ζώνης.



3. Λυγίστε τον αγκώνα σας 90° και προσαρμόστε την μανσέτα – περικάρπιο (βραχιόλι) χρησιμοποιώντας το Velcro στην κύρια ζώνη.



4. Περάστε τον ιμάντα πάνω από τον ώμο σας μέσα στην πόρπη που βρίσκεται στη μανσέτα – περικάρπιο (βραχιόλι). Ρυθμίστε τον ιμάντα σε μια άνετη θέση σε σχέση με τη μανσέτα περικάρπιο και ασφαλίστε με το Velcro. Τοποθετείστε το μικρό προστατευτικό μαξιλαράκι στον υγιή σας ώμο για μεγαλύτερη άνεση.


ΣΥΝΘΕΣΗ

60% απαλό αφρώδες υλικό για πρόσθετη άνεση, 15% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι, 10% ελαστάνη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μην εξακολουθείτε να φοράτε το βοήθημα αν νιώσετε μούδιασμα ή αύξηση του πόνου στο χέρι ή τον ώμο σας. Επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας σε περίπτωση που νιώσετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα. Το συγκεκριμένο ορθοπεδικό βοήθημα, σε καμία περίπτωση δεν θα αποτρέψει ή μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού σας. Μην δένετε πολύ σφιχτά τους ιμάντες. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κοκκινίξεις ή ηρξίματα, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας. .

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που συνιστάται από τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη μη ορθή χρήση του προϊόντος.

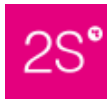

Δεν ενδείκνυται η κοινή χρήση του βοηθήματος με άλλους πάσχοντες

Κρατείστε το βοήθημα μακριά από τα παιδιά. Δεν είναι παιχνίδι.

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αλλαγές στο σώμα σας, αύξηση πόνου, ενόχληση, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας.

Αποφύγετε τη χρήση κρεμών, καταπραυντικών λισιόν, λιπαρών ή οξεικών σκευασμάτων πριν την εφαρμογή ή κατά την εφαρμογή του βοηθήματος.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε εφαρμόσει κατά τρόπο άνετο και αποτελεσματικό τον το βοήθημα

Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα υλικά του.

Σε περίπτωση που έχετε ευαισθησία ή αλλεργία στο βέλκρο ή σε κάποιο από τα υλικά της σύνθεσης του νάρθηκα μην τον εφαρμόζετε απευθείας, αλλά πάνω από ένα βαμβακερό φανελάκι. Συνίσταται να παρεμβάλλεται ένα βαμβακερό ύφασμα μεταξύ του ορθοπεδικού βοηθήματος και του δέρματος για να αποφεύγονται ερεθισμοί από ανεπιθύμητη ή εκτεταμένη εφίδρωση.

Το συγκεκριμένο προϊόν που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ειδική υποστηρικτική βοήθεια και άνεση.

Οδήγηση

Δεδομένης της δυσκολίας σας να χρησιμοποιήσετε με άνεση και τα δυο σας χέρια, δεν δύναστε να οδηγήσετε. Επιπρόσθετα, οι ακινητοποιητές έχουν ως στόχο την ακινητοποίηση του χεριού για τη σωστή και ομαλή αποθεραπεία του.

Ύπνος

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιμάντα ακινητοποίησης κατά τον ύπνο, εκτός αν ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας συμβουλήσουν για το αντίθετο.

Προσωπική Υγιεινή/ Μπάνιο

Δεν πρέπει να φοράτε τον ακινητοποιητή κατά τη διάρκεια του μπάνιου εκτός αν ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας σας συμβουλήσουν για το αντίθετο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Κλίστε ερμητικά τις επιφάνειες που είναι καλυμμένες με βέλκρο.

Ποτέ μην καθαρίζετε εξ επαφής τα βέλκρο προσθέτοντας οποιοδήποτε καθαριστικό στην επιφάνειά τους. Το γεγονός αυτό θα αφαιρέσει από το βέλκρο την επανακολλητική του ικανότητα.

Μην πλένετε ποτέ σε πλυντήριο. Ενδείκνυται μόνο πλύσιμο στο χέρι, στους 30°C.

Μην πιέζετε το προϊόν περιστρέφοντάς το προκειμένου να στραγγίξετε το νερό μετά το πλύσιμο. Υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί η εφαρμογή του.

Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο.

Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη, μαλακτικό ή απορρυπαντικό με ενσωματωμένο μαλακτικό.

Απλώστε κατά μήκος σε μια επιφάνεια μέχρι το προϊόν να στεγνώσει

Το προϊόν δεν σιδερώνεται

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι 100% στεγνό πριν την εφαρμογή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ !

ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ/ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2S ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Instructions for use for 2S ARM-SHOULDER IMMOBILIZING STRAP

CODES: 10.06.031

EN





Instructions for use

2S Arm-Shoulder immobilizing strap

SPECIFICATIONS / INTENDED USE

The Arm-Shoulder Immobilizer immobilizes the shoulder and safely positions the arm close to the body. The shoulder immobilizer you have been given is designed to support your arm, but also to protect you from doing certain motions. It is also to protect your arm from other people pulling on or against the arm and to protect the arm at night, so you do not sleep on it wrong or move it in the wrong position.

APPLICATION INSTRUCTIONS

MEASUREMENT & SIZING

This product is one size, so you do not need to apply any special measuring.

APPLICATION



Before you put on the immobilizer, separate its components, for ease of application



1. Place large chest strap around your chest, just below the nipple line. It is often easiest to apply the chest strap in the sitting position with the shoulder supported. Secure Velcro tightly around the chest. Bring the attached shoulder strap from the back over your good shoulder to the front.



2. Wrap the upper arm cuff around the biceps and secure with the Velcro on the side of the chest strap.



3. Bend your elbow to 90o and secure the wrist/hand cuff on the chest strap.



4. Adjust the shoulder strap that is attached and buckled on hand/wrist cuff. Position the small pillow on your good shoulder for greater comfort

COMPOSITION

60% soft, breathable sponge for added comfort, 15% polyester, 15% cotton, 10% elasthan

GENERAL WARNINGS

Don't continue to wear this device if it causes numbness or increased pain in your arm or shoulder. Call your doctor immediately if you experience either of these symptoms.
This device will not prevent or eliminate any risk of injury. Do not over-tighten the straps. If there are any signs of swelling, pain or skin irritation, discontinue immediately and consult a medical professional.

The support should only be used for its intended purpose in the manner described in this manual. No liability is accepted for improper use of the product.

- Sharing of the support is not recommended.
- Please keep the support out of the reach of children. It is not a toy.
- Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms) please contact your healthcare specialist without delay.
- Ensure the support is fastened comfortably.
- Avoid the use of ointments/ lotions or any substances including grease or acids during use of the support.
- Check the product's composition for possible sensitivity/allergic reaction to any of the product's materials.
- Do not apply the product directly to your skin but over cotton underwear. It is advisable to use protection between the skin and the product in order to avoid rashes from unwanted or excessive sweating.

Daily Activities

The garment is designed to provide comfortable support for general use.

Driving

You should not drive while wearing this support.

Sleeping

You can wear this device while sleeping. Your physician or orthotist will advise you whether you should wear this device while sleeping.

Showering

Remove the support when showering, unless your doctor tells you to keep it on at all times.



WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS

Close the Velcro bands, if any, and wash the product with the Velcro straps hermetically shut.

Never machine wash. Hand wash in water at 30°C. Do not wring the belt to remove water. This is to protect the internal components from damage.

Do not dry clean. Do not use bleach. Do not tumble-dry

Always dry lying flat. Do not dry with heat. (E.g. over a radiator). Do not iron

Make sure that the product is 100% dried before use.

IMPORTANT NOTICE!

WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO OBTAIN MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL PROFESSIONAL.

2S DISCLAIMS ANY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED THAT THESE PRODUCTS PREVENT INJURIES.

IN CASE THE PRODUCT HAS A DEFECT PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER, STORE OR PHARMACY. IN CASE OF A MANUFACTURING MALLFUNCTION YOU MAY RETURN THE PRODUCT WITH YOUR PURCHASE DOCUMENT WITHIN 5 DAYS FROM THE DAY OF THE PURCHASE.

